




超音波画像診断装置 SonoSite NanoMaxx シリーズ

プローブホルダー組立要領説明書

本体をユニバーサルスタンド (V) またはその他のスタンドに取り付ける前に、プローブホルダーを SonoSite NanoMaxx シリーズ超音波画像診断装置に取り付けてください。

ユニバーサルスタンド (V) またはその他のスタンドの洗浄・消毒の方法、アクセサリや周辺機器の使用するための本体のセットアップの方法に関しては、それぞれのスタンドに付属する取扱説明書をご参照ください。

内容物

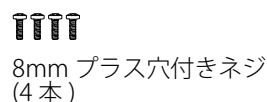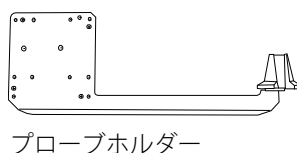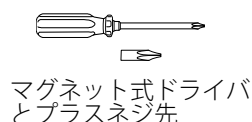

プローブホルダーを本体に装着する

- 1 NanoMaxx ドックを使用する場合には、ドックを本体に装着します。
- 2 プローブホルダーを図のように本体の背面に配置します。
 - ・ カップの先細っている方が上を向き、本体の前面に向くようにします。
 - ・ プローブホルダーのネジ穴の位置を本体のネジ穴と合わせます。
- 3 マグネット式ドライバにプラスネジ先を取り付けます。4本の8mm プラス穴つきネジを4つのネジ穴に差し込み、ドライバで締めます。(図1) ネジはオフセットされています。
- 4 電源中継コネクタケーブルを使用する場合には、本体に差し込み、固定します。
 - a 電源中継コネクタケーブルをケーブルが下向きになるように本体背面のコネクタに接続します。
 - b 締め具の穴が内側に平たい表面が上になるように、締め具を電源中継コネクタケーブルに取り付けます。
 - c 電源中継コネクタケーブルキットに同梱されている六角レンチと同梱のネジを使用して、締め具をしっかりと本体に固定します。(図2)

プローブホルダーを取り外すには、ホルダーを固定している4本のネジをプラスネジドライバで緩めます。

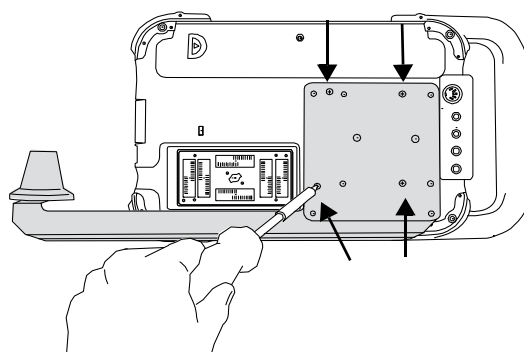


図1 ネジを締め、プローブホルダーを固定する。
(NanoMaxx ドックを本体に装着した状態)。

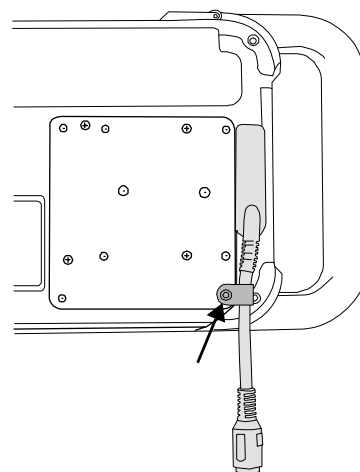


図2 電源中継コネクタケーブルをプローブホルダーに固定する。

NanoMaxx, SonoSite, SonoSite 社ロゴ, および V-Universal, ユニバーサルスタンド (V) は、SonoSite 社が所有権を有する登録商標 (特定の管轄区域) または商標です。

他社の製品も一般に各社の商標または登録商標です。

本書に記述される SonoSite 社製超音波画像診断装置は、次の米国特許および諸外国の特許によって保護されています。5722412, 5817024, 5893363, 6135961, 6203498, 6364839, 6371918, 6383139, 6416475, 6447451, 6471651, 6569101, 6648826, 6575908, 6604630, 6817982, 6835177, 6962566, 7169108, 7449640, 7534211, 7549961, 7588541, 7591786, 7604596, 7643040, 7686766, 7694814, 7727153, 7740586, D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D592760, AU727381, AU730822, CA2372158, CA2373065, CN ZL 97113678.5, CN ZL 98106133.8, CN ZL 98108973.9, CN ZL 200830007734.8, DE60021552.0, DE60029777.2, DE60034670.6, DE69730563.5, DE6980539.6, DE69831698.3, DE60 2004 23 816.3-08, FR0815793, FR0875203, FR0881492, FR1175713, FR1180970, FR1589878, GB0875203, GB0881492, GB1175713, GB1180970, GB1180971, GB1589878, IT0815793, IT0881492, IT1175713, IT1589878, KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD000897368-0001, SP0815793, SP0881492, SP1589878.

その他申請中の特許もあります。

選任製造販売業者：
株式会社 ソノサイト・ジャパン
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-16-1
TEL: 03 (5304) 5337

外国指定管理医療機器製造等事業者：
ソノサイトインク (米国)
(SonoSite, Inc.)

03/2011
Copyright 2011 by
SonoSite, Inc.
All rights reserved.



一般的名称	汎用超音波画像診断装置 (40761000)
販売名	SonoSite NanoMaxx シリーズ
医療機器のクラス	管理医療機器、特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	221ADBZI00091000

P14448-01

